

www.vektor-med.ru

ВЕКТОР



РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КОНТРАЦЕПТИВОВ
ВНУТРИМАТОЧНЫХ
И РАСХОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
ДЛЯ ГИНЕКОЛОГОВ



ВЕКТОР

Женское здоровье — наша забота!




Добро пожаловать в мир инноваций для женского здоровья от компании Вектор!

Компания Вектор занимает лидирующие позиции на российском рынке медицинских изделий в сфере гинекологии. Мы предлагаем широкий ассортимент высококачественной продукции, разработанной с использованием самых современных технологий и инновационных решений.

Наша миссия заключается в улучшении качества медицинской помощи женщинам, предоставлении врачам надежных инструментов для диагностики и лечения, а также в продвижении здорового образа жизни. Мы стремимся к тому, чтобы каждая женщина имела доступ к современным и безопасным медицинским изделиям.

Вектор гордится своими достижениями и признанием среди специалистов в области гинекологии. Мы активно сотрудничаем с медицинскими учреждениями и дистрибьюторами, предлагая им взаимовыгодные условия сотрудничества и поддержку на всех этапах работы.

Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе сделать заботу о женском здоровье более эффективной и доступной!

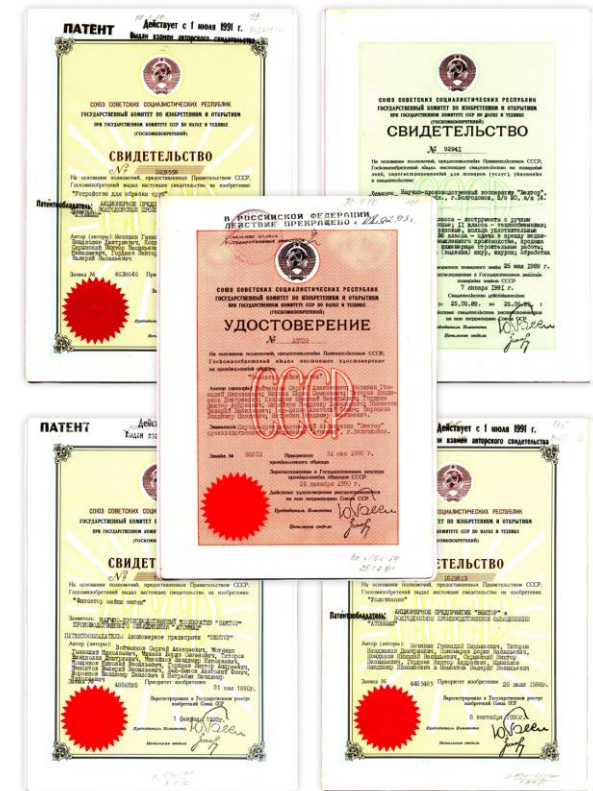

[illegible][illegible][illegible]

СЕРТИФИКАТ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА
ФИНАНСИРОВАНИЯ АКТИВНОСТИ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И НАДЕЖНОСТИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РСС. КИ. 12784.АИТ.СО.00020072

Срок действия: с 12.03.2018 по 11.03.2021

№ 07027116

ОБЪЕКТ НА СЕРТИФИКАЦИЮ: 12.03.2018-12.03.2021, 01.03.2021-01.03.2022, 01.03.2022-01.03.2023, 01.03.2023-01.03.2024, 01.03.2024-01.03.2025, 01.03.2025-01.03.2026, 01.03.2026-01.03.2027, 01.03.2027-01.03.2028, 01.03.2028-01.03.2029, 01.03.2029-01.03.2030, 01.03.2030-01.03.2031, 01.03.2031-01.03.2032, 01.03.2032-01.03.2033, 01.03.2033-01.03.2034, 01.03.2034-01.03.2035, 01.03.2035-01.03.2036, 01.03.2036-01.03.2037, 01.03.2037-01.03.2038, 01.03.2038-01.03.2039, 01.03.2039-01.03.2040, 01.03.2040-01.03.2041, 01.03.2041-01.03.2042, 01.03.2042-01.03.2043, 01.03.2043-01.03.2044, 01.03.2044-01.03.2045, 01.03.2045-01.03.2046, 01.03.2046-01.03.2047, 01.03.2047-01.03.2048, 01.03.2048-01.03.2049, 01.03.2049-01.03.2050, 01.03.2050-01.03.2051, 01.03.2051-01.03.2052, 01.03.2052-01.03.2053, 01.03.2053-01.03.2054, 01.03.2054-01.03.2055, 01.03.2055-01.03.2056, 01.03.2056-01.03.2057, 01.03.2057-01.03.2058, 01.03.2058-01.03.2059, 01.03.2059-01.03.2060, 01.03.2060-01.03.2061, 01.03.2061-01.03.2062, 01.03.2062-01.03.2063, 01.03.2063-01.03.2064, 01.03.2064-01.03.2065, 01.03.2065-01.03.2066, 01.03.2066-01.03.2067, 01.03.2067-01.03.2068, 01.03.2068-01.03.2069, 01.03.2069-01.03.2070, 01.03.2070-01.03.2071, 01.03.2071-01.03.2072, 01.03.2072-01.03.2073, 01.03.2073-01.03.2074, 01.03.2074-01.03.2075, 01.03.2075-01.03.2076, 01.03.2076-01.03.2077, 01.03.2077-01.03.2078, 01.03.2078-01.03.2079, 01.03.2079-01.03.2080, 01.03.2080-01.03.2081, 01.03.2081-01.03.2082, 01.03.2082-01.03.2083, 01.03.2083-01.03.2084, 01.03.2084-01.03.2085, 01.03.2085-01.03.2086, 01.03.2086-01.03.2087, 01.03.2087-01.03.2088, 01.03.2088-01.03.2089, 01.03.2089-01.03.2090, 01.03.2090-01.03.2091, 01.03.2091-01.03.2092, 01.03.2092-01.03.2093, 01.03.2093-01.03.2094, 01.03.2094-01.03.2095, 01.03.2095-01.03.2096, 01.03.2096-01.03.2097, 01.03.2097-01.03.2098, 01.03.2098-01.03.2099, 01.03.2099-01.03.2100, 01.03.2100-01.03.2101, 01.03.2101-01.03.2102, 01.03.2102-01.03.2103, 01.03.2103-01.03.2104, 01.03.2104-01.03.2105, 01.03.2105-01.03.2106, 01.03.2106-01.03.2107, 01.03.2107-01.03.2108, 01.03.2108-01.03.2109, 01.03.2109-01.03.2110, 01.03.2110-01.03.2111, 01.03.2111-01.03.2112, 01.03.2112-01.03.2113, 01.03.2113-01.03.2114, 01.03.2114-01.03.2115, 01.03.2115-01.03.2116, 01.03.2116-01.03.2117, 01.03.2117-01.03.2118, 01.03.2118-01.03.2119, 01.03.2119-01.03.2120, 01.03.2120-01.03.2121, 01.03.2121-01.03.2122, 01.03.2122-01.03.2123, 01.03.2123-01.03.2124, 01.03.2124-01.03.2125, 01.03.2125-01.03.2126, 01.03.2126-01.03.2127, 01.03.2127-01.03.2128, 01.03.2128-01.03.2129, 01.03.2129-01.03.2130, 01.03.2130-01.03.2131, 01.03.2131-01.03.2132, 01.03.2132-01.03.2133, 01.03.2133-01.03.2134, 01.03.2134-01.03.2135, 01.03.2135-01.03.2136, 01.03.2136-01.03.2137, 01.03.2137-01.03.2138, 01.03.2138-01.03.2139, 01.03.2139-01.03.2140, 01.03.2140-01.03.2141, 01.03.2141-01.03.2142, 01.03.2142-01.03.2143, 01.03.2143-01.03.2144, 01.03.2144-01.03.2145, 01.03.2145-01.03.2146, 01.03.2146-01.03.2147, 01.03.2147-01.03.2148, 01.03.2148-01.03.2149, 01.03.2149-01.03.2150, 01.03.2150-01.03.2151, 01.03.2151-01.03.2152, 01.03.2152-01.03.2153, 01.03.2153-01.03.2154, 01.03.2154-01.03.2155, 01.03.2155-01.03.2156, 01.03.2156-01.03.2157, 01.03.2157-01.03.2158, 01.03.2158-01.03.2159, 01.03.2159-01.03.2160, 01.03.2160-01.03.2161, 01.03.2161-01.03.2162, 01.03.2162-01.03.2163, 01.03.2163-01.03.2164, 01.03.2164-01.03.2165, 01.03.2165-01.03.2166, 01.03.2166-01.03.2167, 01.03.2167-01.03.2168, 01.03.2168-01.03.2169, 01.03.2169-01.03.2170, 01.03.2170-01.03.2171, 01.03.2171-01.03.2172, 01.03.2172-01.03.2173, 01.03.2173-01.03.2174, 01.03.2174-01.03.2175, 01.03.2175-01.03.2176, 01.03.2176-01.03.2177, 01.03.2177-01.03.2178, 01.03.2178-01.03.2179, 01.03.2179-01.03.2180, 01.03.2180-01.03.2181, 01.03.2181-01.03.2182, 01.03.2182-01.03.2183, 01.03.2183-01.03.2184, 01.03.2184-01.03.2185, 01.03.2185-01.03.2186, 01.03.2186-01.03.2187, 01.03.2187-01.03.2188, 01.03.2188-01.03.2189, 01.03.2189-01.03.2190, 01.03.

[illegible][illegible][illegible][illegible]


КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Женское здоровье – наша работа!
Вектор
ПРОЦЕДУРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Аспиратор вакуумный мануальный АВМ-«Вектор»
Код ОКПД 2/КТРУ 32.50.13.190-00000430 - Набор для биопсии эндометрия

Назначение. АВМ предназначен для забора биоматериала из полости матки, в том числе эндометрия, в объеме, достаточном для проведения исследований и других манипуляций.

Устройство. АВМ содержит канюлю (см. рис.), на которой расположены: серебок, ограничитель, ручка и отверстие изгибания. Канюля соединена изогнутой в осевом направлении со шприцом через адаптер. Шприц снабжен фиксатором, позволяющим перемещать канюлю.

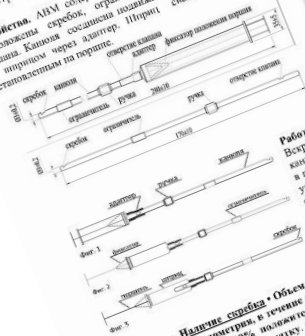

Работа. Вскрыть пакет в обозначенном месте. Ввести канюлю через отверстие фиксатора в шприц. Углубить канюлю на глубину, необходимую для забор биоматериала. Вращательными и возвратно-поступательными движениями канюлю извлечь из матки.

Преимущества. Наличие серебка. Обеспечивает забор биоматериала без повреждения эндометрия, в отличие от других методов. В отличие от других методов, не требует расширения полости матки. Канюля имеет диаметр 3,0 мм, что позволяет проводить процедуру безболезненно. Канюля имеет диаметр 3,0 мм, что позволяет проводить процедуру безболезненно.

Аспиратор вакуумный мануальный состоит из канюли с фиксатором длиной 170-180 мм, диаметром рабочей части 3,0 мм. Канюля имеет диаметр 3,0 мм, что позволяет проводить процедуру безболезненно.

Бесплатная доставка по России. НДС не облагается. Срок годности - 94 г. г.

Адрес: АО «Вектор» ул. Железнодорожная, д. 94, г. Волгодонск, Ростовская обл., Россия, 347369
Тел./Факс: (8639)26-84-96, 26-86-31, 26-86-39, +79281759874; +79614094191; +79889515021.
E-mail: vektor@vektor-med.ru Сайт: www.vektor-med.ru
WhatsApp: <https://www.whatsapp.com/channel/00251111111111111111>
Telegram: https://t.me/vektor_med
Запчасть: <https://www.wildberries.ru/catalog/247785062/detail.aspx>
Wildberries: <https://www.wildberries.ru/catalog/247785062/detail.aspx>
OZON: <https://www.ozon.ru/collection/kontratsentivny-nutrimatichnyy-vektor-31532146/>

Вектор
ПРОЦЕДУРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ – НАША ЗАБОТА!

Бесплатная доставка почтой России при заказе от 5000 рублей.
НДС не предусмотрен (работаем по УСН).



Наименование контрацептивов	Код ОКПД 2/КТРУ 32.50.13.190-00008765	Цена, руб.
Золото – Au Au 300T, Au 300Ф, КВЫК-Au-300	  	
Золото – Au прополис/канюля Au 300T ПК, Au 300Ф ПК	  	
Серебро – Ag Ag 400T, Ag 400Ф, КВЫК-Ag300	  	
Серебро – Ag прополис/канюля Ag 400T ПК, Ag 400Ф ПК	  	
Серебро/медь – Ag/Cu AgCu 150-250T, AgCu 150-250Ф, КВЫК-AgCu-150-250	  	
Серебро/медь – Ag/Cu прополис/канюля AgCu 150-250T ПК, AgCu 150-250Ф ПК	  	
Медь – Cu Cu 400T, Cu 400Ф	  	
Медь – Cu прополис/канюля Cu 400T ПК, Cu 400Ф ПК	  	
Устройство для внутриматочной биопсии «УВБ-Вектор» 32.50.13.110-00005026		
Аспиратор вакуумный мануальный «АВМ-Вектор» 32.50.13.190-00000430		

Адрес: АО «Вектор» ул. Железнодорожная, д. 94, г. Волгодонск, Ростовская обл., Россия, 347369
Тел./Факс: (8639)26-84-96, 26-86-31, 26-86-39, +79281759874; +79614094191; +79889515021.

Wildberries: <https://www.wildberries.ru/catalog/247785062/detail.aspx>
OZON: <https://www.ozon.ru/collection/kontratsentivny-nutrimatichnyy-vektor-31532146/>

Женское здоровье – наша работа!
Вектор
ПРОЦЕДУРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Устройство для внутриматочной биопсии УВБ-«Вектор»

Код ОКПД 2/КТРУ - 32.50.13.110-00005026
Канюля внутриматочная, одноразового использования.
РУ № ФСР 2010/06872 от 04.12.2020 г.



Работа устройства. Трубка (канюля) вводится в матку до отверстия. Ограничитель устанавливается на нужную глубину введения. Вращательными движениями трубки производится забор биоматериала. Канюля извлекается из матки. Биоматериал извлекается из трубки. Шток извлекается из трубки. Канюля извлекается из трубки. Шток извлекается из трубки. Канюля извлекается из трубки. Шток извлекается из трубки.

Преимущества устройства. В отличие от выскабливания, не требует расширения полости матки. Канюля имеет диаметр 3,0 мм, что позволяет проводить процедуру безболезненно. Канюля имеет диаметр 3,0 мм, что позволяет проводить процедуру безболезненно.

Технические данные. Канюля имеет диаметр 3,0 мм и длиной 265±2 мм. Канюля имеет диаметр 3,0 мм и длиной 265±2 мм. Канюля имеет диаметр 3,0 мм и длиной 265±2 мм. Канюля имеет диаметр 3,0 мм и длиной 265±2 мм.

Бесплатная доставка по России при заказе от 5000 рублей. НДС не облагается. Срок годности - 94 г. г.

Адрес: АО «Вектор» ул. Железнодорожная, д. 94, г. Волгодонск, Ростовская обл., Россия, 347369
Тел./Факс: (8639)26-84-96, 26-86-31, 26-86-39, +79281759874; +79614094191; +79889515021.
E-mail: vektor@vektor-med.ru Сайт: www.vektor-med.ru
WhatsApp: <https://www.whatsapp.com/channel/00251111111111111111>
Telegram: https://t.me/vektor_med
Запчасть: <https://www.wildberries.ru/catalog/247785062/detail.aspx>
Wildberries: <https://www.wildberries.ru/catalog/247785062/detail.aspx>
OZON: <https://www.ozon.ru/collection/kontratsentivny-nutrimatichnyy-vektor-31532146/>



СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ В ГИНЕКОЛОГИИ

ПАЙПЕЛЬ-БИОПСИЯ

Биопсия эндометрия - диагностическая процедура с забором материала для последующего цитологического или гистологического исследования. В классическом варианте применяется выскабливание, которое может быть достаточно болезненным, травматичным, требует специальной подготовки и нахождения женщины в стационаре.

• более щадящий метод, меньше риск осложнений. В отличие от выскабливания не требует расширения цервикального канала, практически исключены травмы, кровотечения и прочее.

• более удобный и экономичный, как по временным так и по финансовым затратам. Проводится без наркоза, быстрее по времени. Женщине не нужно находиться в стационаре, сразу после процедуры она может покинуть медучреждение.

• мало противопоказаний, в их числе беременность, болезни крови и острые воспаления органов малого таза.

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ:

- Бесплодие неясного генеза (исключение маточного фактора);
- Подтверждения хронического эндометрита;
- Маточные кровотечения неясной этиологии;
- Полип, гиперплазия эндометрия (контроль на фоне лечения после гистерорезектоскопии);
- Пограничные размеры М-эха в период менопаузы;
- Подготовка к ЭКО;
- Подготовка к операционным вмешательствам на матке.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- Беременность;
- Болезни крови;
- Острые воспаления органов малого таза.

ПРИМЕНЕНИЕ ПАЙПЕЛЬ-БИОПСИИ ПЕРЕД ЭКО

Цели использования перед ЭКО

Оценка состояния эндометрия:

Пайпель позволяет изучить структуру и состояние эндометрия, чтобы убедиться в его готовности к имплантации эмбриона.

Выявление патологий:


Процедура помогает обнаружить воспалительные процессы, хронический эндометрит, гиперплазию или другие нарушения, которые могут снизить шансы на успешное ЭКО.

Иммуногистохимическое исследование:

Иногда пайпель используется для анализа рецептивности эндометрия (ERA-тест), чтобы определить оптимальное время для переноса эмбриона.

Стимуляция эндометрия:

Механическое воздействие пайпеля может улучшить кровоснабжение и повысить восприимчивость эндометрия к имплантации.

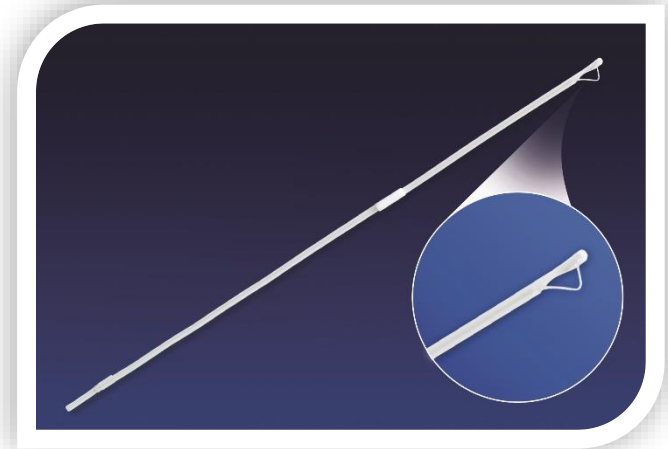



Устройство для внутриматочной биопсии УВБ - «Вектор»



Краткое описание устройства

УВБ предназначено для забора биоматериала из полости матки, в том числе биопсии эндометрия, в объеме, достаточном для проведения исследований и других манипуляций. Это безопасный, информативный и удобный метод исследования.

Устройство для внутриматочной биопсии (далее устройство) состоит из трубки диаметром 3 мм и длиной 265 мм, имеющей боковое отверстие на дистальном конце, и штока с ручкой. Длина устройства в сборе 280 мм.

Шток размещается внутри трубки. На дистальном конце штока, расположенном в полости дистального конца трубки, имеется эластичный скребок с возможностью его выхода за контуры трубки через боковое отверстие.

Торец дистального конца трубки имеет сферическую атравматичную форму, а на противоположном ее конце находится уплотняющее устройство (манжета). На трубке расположен ограничитель.

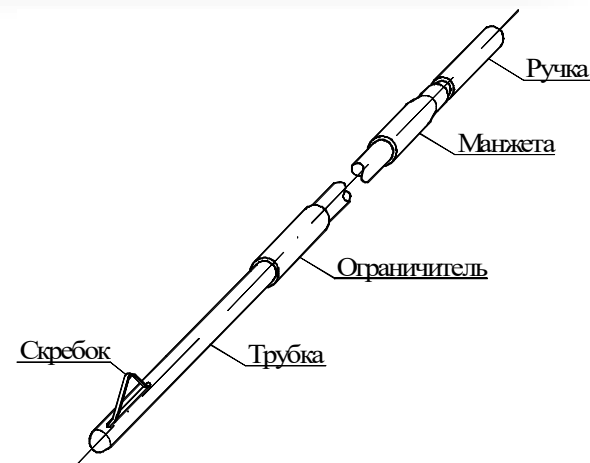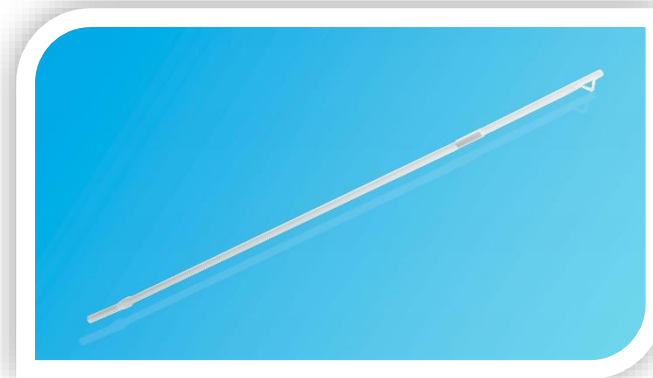



Устройство для внутриматочной биопсии УВБ - «Вектор»

Преимущество системы фирмы «Вектор»

По сравнению с другими производителями — это **наличие скребка** на аспирационной трубке, что позволяет получить большее количество материала для исследования, в том числе подлежащие ткани эндометрия.

Это имеет важное значение для диагностики хронического эндометрита и онкологических заболеваний.

Аспирационная биопсия с помощью УВБ- «Вектор» является безопасным, информативным и удобным методом исследования.

Его следует рекомендовать к более широкому применению для уточнения диагноза и грамотного лечения значительных групп гинекологических пациентов.



врач высшей категории рабочий стаж
года РНИМУ им. Н.И. Пирогова
ученица академика Г.М. Савельевой

Более чем в 2100 лечебных учреждениях России успешно применяется это изделие.



Аспиратор вакуумный мануальный АВМ - «Вектор»

Назначение

АВМ предназначен для забора биоматериала из полости матки, в том числе биопсии эндометрия.

Техническое описание

Аспиратор вакуумный мануальный состоит из шприца с фиксатором положения поршня объемом 10 мл. и канюли с адаптером длиной 170 мм, диаметром рабочей части 3 мм. На дистальном конце канюли боковое отверстие выполнено в виде скребка, на противоположном конце имеется отверстие клапана. Длина устройства в сборе 280 мм. Изделие одноразовое, стерильное.







Аспиратор вакуумный мануальный АВМ - «Вектор»

Работа

- вскрыть пакет в обозначенном месте.
- извлечь шприц.
- извлечь канюлю.
- ввести канюлю скребком наружу в цветной адаптер до упора в поршень
- клапан закрыт (фиг.1).
- выдвинуть поршень из шприца до упора фиксатора в шприц
- вакуум в шприце (фиг.2).
- установить ограничитель на глубину введения канюли.
- ввести канюлю в матку скребком к стенке матки.
- ввести канюлю в шприц до упора ручки в адаптер
- вакуум соединился с канюлей (фиг.3).
- взять пробу вращательным и возвратно-поступательным движением канюли.
- удалить канюлю из матки и биоматериал из канюли и шприца.

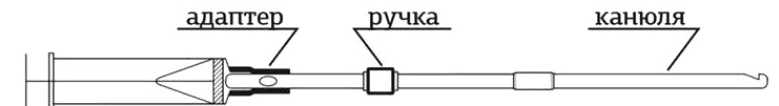

Фиг. 1

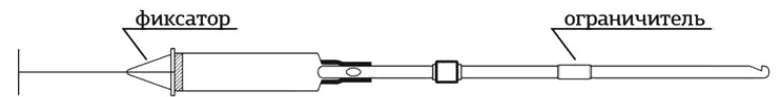

Фиг. 2



Фиг. 3



Аспиратор вакуумный мануальный АВМ - «Вектор»

Преимущества

- Наличие скребка
- Объем забираемого биоматериала до 10 мл.
- Возможность забирать биоматериал, включая биопсию эндометрия, в течение длительного времени без потери вакуума.
- Испытания в ведущих клиниках страны показали более 99% положительный результат.
- Легкость и безопасность в применении, т.к. вакуум создается до введения канюли в матку.
- Возможность использования в амбулаторных условиях.
- Разумная цена.



Кольцеобразные внутриматочные спирали «Вектор»

**Форма более всего подходит для женщин,
подверженных самопроизвольному
изгнанию контрацептивов из матки (экспульсии).**

Диаметр кольца - 24 мм.

Контрацептив
внутриматочный
золотосодержащий
кольцеобразный
КВмК-Аu-300-"Вектор"



Контрацептив
внутриматочный
серебросодержащий
кольцеобразный
КВмК-Ag-300-"Вектор"




Контрацептив
внутриматочный
медь-серебро содержащий
**КВмК-AgCu-150*250-
"Вектор"**



Т-образные внутриматочные спирали «Вектор-экстра»


**Т-образная форма традиционная,
преимущественно для рожавших женщин.**

Габариты спирали - 32 x 32 мм.

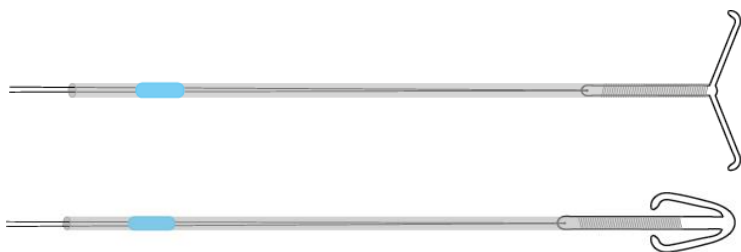

Контрацептив
внутриматочный
золотосодержащий
Т-образный
Au 300T




Контрацептив
внутриматочный
серебросодержащий
Т-образный
Ag 400T

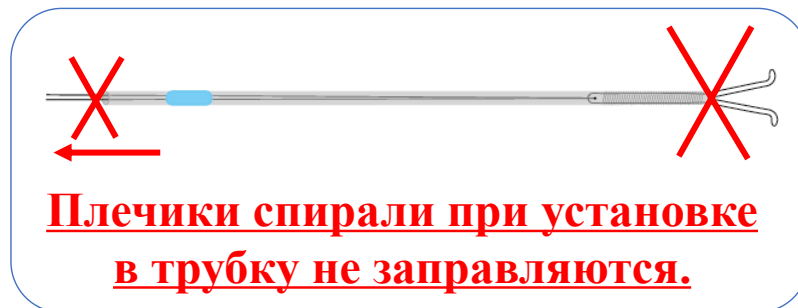

**Плечики спирали при установке
в трубку не заправляются.**

Контрацептив
внутриматочный
серебро-
медьсодержащий
AgCu 150/250T

Контрацептив
внутриматочный
медьсодержащий
Т-образный
Cu 400 T

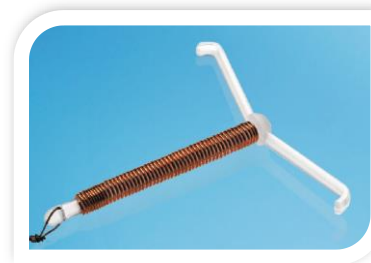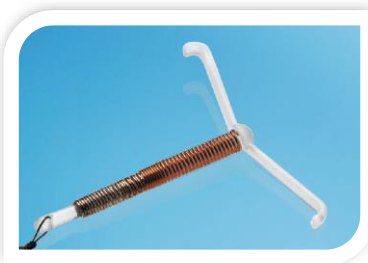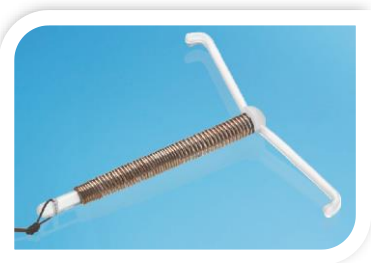

Т-образные внутриматочные спирали с прополисом и календулой «Вектор-экстра»

ПРОПОЛИС И КАЛЕНДУЛА – снижают болевые симптомы в полости матки, подавляют микробную флору, улучшают стерильность, способствуют заживлению мелких травм слизистой оболочки, обладают бактерицидными и дезинфицирующими свойствами.

Противопоказания - аллергия на мед и продукты пчеловодства.

Контрацептив
внутриматочный
золотосодержащий
Т-образный
Au 300Т ПК



Контрацептив
внутриматочный
серебросодержащий
Т-образный
Ag 400Т ПК



Контрацептив
внутриматочный
серебро-
медьсодержащий
AgCu 150/250Т ПК



Контрацептив
внутриматочный
медьсодержащий
Т-образный
Cu 400 Т ПК




Ф-образные внутриматочные спирали «Вектор-экстра»

Ф-образная форма – универсальная, для рожавших и не рожавших, с пониженной травмоопасностью.

Габариты спирали - 18 x 32 мм.

Ф-образные спирали толкателем не комплектуются.


Контрацептив
внутриматочный
золотосодержащий
Ф-образный
Au Ф

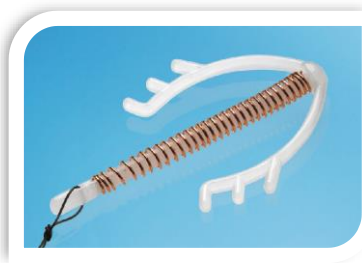


Контрацептив
внутриматочный
серебросодержащий
Ф-образный
Ag 400Ф



Контрацептив
внутриматочный
серебро-
медьсодержащий
AgCu 150/250Ф

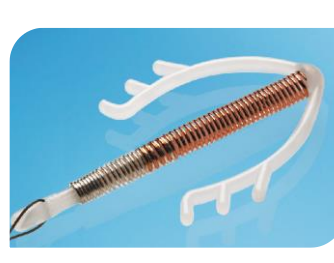

Контрацептив
внутриматочный
медьсодержащий
Ф-образный
Cu 400 Ф

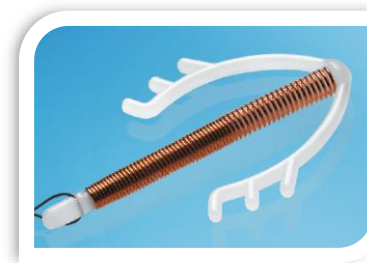


Ф-образные внутриматочные спирали «Вектор-экстра»

ПРОПОЛИС И КАЛЕНДУЛА – снижают болевые симптомы в полости матки, подавляют микробную флору, улучшают стерильность, способствуют заживлению мелких травм слизистой оболочки, обладают бактерицидными и дезинфицирующими свойствами.

Противопоказания - аллергия на мед и продукты пчеловодства.


Контрацептив
внутриматочный
золотосодержащий
Ф-образный
Au Ф ПК

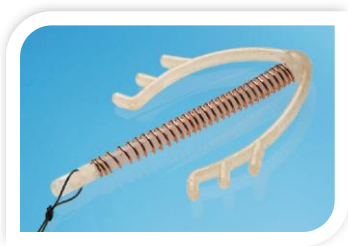

Контрацептив
внутриматочный
серебросодержащий
Ф-образный
Ag 400Ф ПК



Контрацептив
внутриматочный
серебро-
медьсодержащий
AgCu 150/250Ф ПК

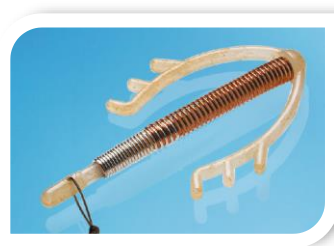

Контрацептив
внутриматочный
медьсодержащий
Ф-образный
Cu 400 Ф ПК



Свойства металлов в контрацептивах

Золотосодержащие внутриматочные спирали

ЗОЛОТО (AU) – обеспечивает повышенный противовоспалительный и противозачаточный эффект, может применяться у женщин, не воспринимающих другие металлы, при длительном применении - 10 и более лет - не распадается на фрагменты, не нарушает естественного созревания яйцеклетки, нормализует гормональный фон и повышает сексуальность, способствует улучшению кровообращения.

Внутриматочные спирали состоят из высококачественного рентгеноконтрастного полиэтиленового каркаса, на котором навита нить из ЦЕЛЬНОГО ЗОЛОТА 585 пробы с активной поверхностью 300 мм кв., к каркасу крепится эластичная контрастная трансцервикальная нить.

Пластмассовые каркасы контрацептивов «Вектор-экстра» могут быть покрыты тонкой водорастворимой плёнкой из смеси биологически активных веществ – прополиса и календулы.

Серебросодержащие внутриматочные спирали

СЕРЕБРО (Ag) способствует снижению воспалений, нарушений менструального цикла, болей и вынужденных удалений контрацептивов.

Контрацептивный эффект длится от 7-ти лет.

Внутриматочная спираль состоит из высококачественного рентгеноконтрастного полиэтиленового каркаса, на котором навита нить из осеребрённой медной проволоки с активной поверхностью 400 мм кв., к каркасу крепится эластичная контрастная трансцервикальная нить.

Пластмассовые каркасы контрацептивов «Вектор-экстра» могут быть покрыты тонкой водорастворимой плёнкой из смеси биологически активных веществ – прополиса и календулы.

Свойства металлов в контрацептивах

Серебро-медьсодержащие внутриматочные спирали

Медь (CU) – повышает контрацептивный эффект по сравнению с инертными контрацептивами.

Серебро (Ag) обладает бактерицидными и противовоспалительными свойствами.

Контрацептивный эффект длится от 5-ти лет.

Внутриматочная спираль состоит из высококачественного рентгеноконтрастного полиэтиленового каркаса, на котором навита нить из медной проволоки площадью поверхности 250 мм² и осеребрённой медной проволоки площадью 150 мм², к каркасу крепится эластичная контрастная трансцервикальная нить.

Пластмассовые каркасы контрацептивов «Вектор-экстра» могут быть покрыты тонкой водорастворимой плёнкой из смеси биологически активных веществ – прополиса и календулы.

Медные внутриматочные спирали

Медь (CU) – повышает контрацептивный эффект по сравнению с инертными контрацептивами.

Служит от 3 лет.

Внутриматочная спираль состоит из высококачественного рентгеноконтрастного полиэтиленового каркаса, на котором навита нить из медной проволоки с активной поверхностью 400 мм кв., к каркасу крепится эластичная контрастная трансцервикальная нить.

Пластмассовые каркасы контрацептивов «Вектор-экстра» могут быть покрыты тонкой водорастворимой плёнкой из смеси биологически активных веществ – прополиса и календулы.



Мы в компании Вектор убеждены, что наше сотрудничество может принести значительные преимущества как вашему бизнесу, так и пациентам, которым вы помогаете. Вместе мы можем достичь новых высот в области здравоохранения:

Высококачественная продукция: Вектор предлагает инновационные решения, которые устанавливают стандарты в области гинекологии.

Взаимовыгодное партнерство: Мы ценим каждого нашего партнера и стремимся к созданию долгосрочных отношений на принципах взаимной выгоды.

Поддержка и развитие: Предоставляем полную поддержку на всех этапах сотрудничества, включая маркетинг, обучение и продвижение.

Призыв к действию: Мы приглашаем вас начать сотрудничество с нами сегодня, чтобы вместе работать над улучшением здоровья женщин.

ВЕКТОР – ВАШ
НАДЕЖНЫЙ
ВЫБОР В МИРЕ
МЕДИЦИНЫ



**Спасибо за внимание!
С нетерпением ждем
ВОЗМОЖНОСТЬ
сотрудничать с вами.**



347369 , Ростовская область,
г. Волгодонск, ул. Железнодорожная, 94



**8(8639) 26-84-96, 26-86-31, 26-86-39,
WhatsApp, Telegram, MAX +79281759874, +79614094191, +79889515021**



vektor@vektor-med.ru



www.vektor-med.ru , вектор-мед.пф
