



ВЕКТОР

Прайс с 01.03.2023 г.


Устройство для внутриматочной биопсии УВБ - «Вектор»

Цена изделия – 230 руб.

АО «Вектор» предлагает одноразовое полимерное устройство, позволяющее быстро и безболезненно получать информативный материал из полости матки для цитологического и гистологического исследований.

Регистрационное удостоверение
№ ФСР 2010/06872 от
04.12.2020г.

Патент на изобретение
№ 2250078

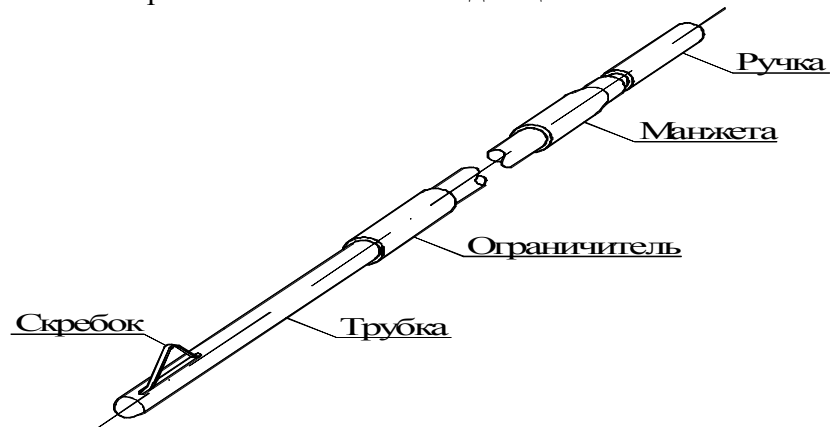

Краткое описание устройства.

Устройство для внутриматочной биопсии (далее устройство) состоит из трубки диаметром 3 мм и длиной 265 мм, имеющей боковое отверстие на дистальном конце, и штока с ручкой. Шток размещается внутри трубки. На дистальном конце штока, расположенном в полости дистального конца трубки, имеется эластичный скребок с возможностью его выхода за контуры трубки через боковое отверстие. Торец дистального конца трубки имеет сферическую атравматичную форму, а на противоположном ее конце находится уплотняющее устройство (манжета). На трубке расположен ограничитель.

Работа устройства.

В исходном (транспортном) положении шток слегка выдвинут из трубки - при этом скребок находится внутри трубки напротив бокового отверстия. Ограничитель устанавливается на нужную глубину введения устройства в полость матки, и устройство за трубку вводится в матку до ограничителя. Удерживая трубку, шток подается вперед до упора – при этом скребок через боковое отверстие в трубке выходит наружу. Вращением устройства скребком отделяется от стенок матки биоматериал, который засасывается через боковое отверстие трубки внутрь при выдвижении штока, после чего устройство с биоматериалом удаляется из полости матки. Скребок при выдвижении штока возвращается внутрь трубки.

Преимущества устройства.

Наличие скребка обеспечивает при вращении устройства системную биопсию эндометрия и представительность пробы.

Расположение скребка внутри трубки при прохождении цервикального канала, сферическая поверхность дистального конца трубки и ее небольшой диаметр позволяют безболезненно вводить устройство в полость матки в амбулаторных условиях.

Уплотнение на проксимальном конце трубки позволяет увеличить количество забираемого биоматериала за счет исключения подсоса воздуха.

При необходимости устройство может использоваться для аспирации содержимого матки без биопсии.

Мы Вам гарантируем:

- доброжелательное рассмотрение Ваших предложений;
- не менее 80 % срока годности;
- порядочность во взаимоотношениях.

Более чем в 2100 лечебных учреждениях России успешно применяется это изделие.

Бесплатная доставка почтой России при заказе от 3000 рублей.

ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС ПО ЛЮБОМУ ИЗ НИЖЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СРЕДСТВ СВЯЗИ ИЛИ В ИНТЕРНЕТ – МАГАЗИНЕ.

Адрес: АО "Вектор" ул. Железнодорожная, д. 94, г. Волгодонск, Ростовская обл., Россия, 347369

Тел./Факс: (8639)26-84-96, 26-86-31, 26-86-39.

Моб. тел. (WhatsApp, Viber, Telegram): +79281759874 ; +79614094191; +79889515021.

Эл. почта: vektor@vektor-med.ru

Веб-сайт: www.vektor-med.ru* vektor-med.ru