

ВЕКТОР



Аспиратор вакуумный ручной

АВМ - «Вектор»

Цена изделия - 495 руб.



Код КТРУ 32.50.13.190-00007025

РУ № РЗН 2017/5453 от 04.12.2020



Назначение. АВМ предназначен для забора биоматериала из полости матки, в том числе биопсии эндометрия, в объеме, достаточном для проведения исследований и других манипуляций.

Устройство. АВМ содержит канюлю (см. рис.), на которой расположены скребок, ограничитель, ручка и отверстие клапана. Канюля соединена подвижно в осевом направлении со шприцем через адаптер. Шприц снабжен фиксатором, установленным на поршне.

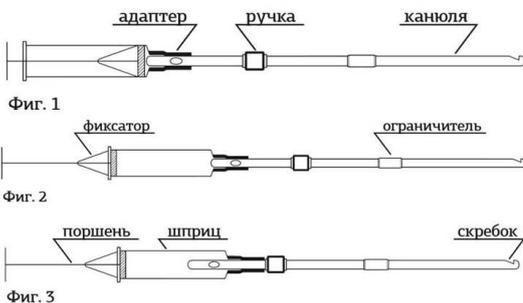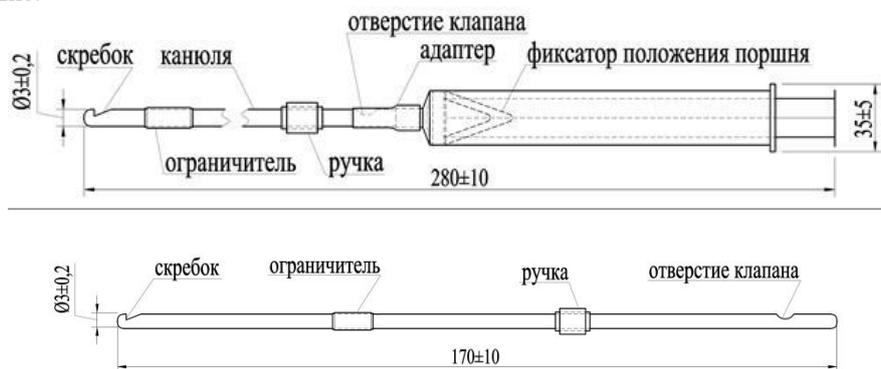

Работа. Вскрыть пакет в обозначенном месте. • Извлечь шприц. • Извлечь канюлю. • Ввести канюлю скребком наружу в цветной адаптер до упора в поршень – **клапан закрыт** (фиг.1). • Выдвинуть поршень из шприца до упора фиксатора в шприц – **вакуум в шприце** (фиг.2). • Установить ограничитель на глубину введения канюли. • Ввести канюлю в матку скребком к стенке матки. • Ввести канюлю в шприц до упора ручки в адаптер – **вакуум соединился с канюлей** (фиг.3). • Взять пробу вращательным и возвратно-поступательным движением канюли. • Удалить канюлю из матки и биоматериал из канюли и шприца.

Преимущества. Наличие скребка • Объем забираемого биоматериала до 10 мл. • Возможность забирать биоматериал, включая биопсию эндометрия, в течение длительного времени без потери вакуума. • Испытания в ведущих клиниках страны показали более 99% положительный результат. • Легкость и безопасность в применении, т.к. вакуум создается до введения канюли в матку. • Возможность использования в амбулаторных условиях. • Разумная цена.

Техническое задание

Аспиратор вакуумный ручной состоит из шприца с фиксатором положения поршня объемом 10 мл., и канюли с адаптером длиной 170±10 мм, диаметром рабочей части 3±0,2 мм. На дистальном конце канюли боковое отверстие выполнено в виде скребка, на противоположном конце имеется отверстие клапана. Длина устройства в сборе 280±10 мм. Изделие одноразовое, стерильное.

Бесплатная доставка почтой России при заказе от 3000 рублей.

НДС не облагается. Срок годности не менее 80%.

ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ НА ЯНДЕКСЕ: <https://vektor-zheleznodorozhnaja-ulitsa.clients.site>

Адрес: АО "Вектор" ул. Железнодорожная, д. 94, г. Волгодонск, Ростовская обл., Россия, 347369

Тел./Факс: (8639)26-84-96, 26-86-31, 26-86-39.

Моб. тел. (WhatsApp, Viber, Telegram): +79281759874; +79614094191; +79889515021.

Эл. почта: vektor@vektor-med.ru

Веб-сайт: www.vektor-med.ru vektor-med.ru

Генеральный директор

Т.О. Мотягина

